


CANADIER mit BREMSKETTE RETTUNGSSCHLITTEN

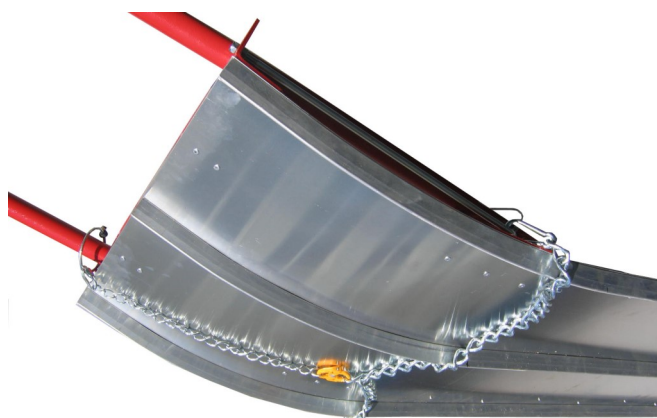

Besonders leichter und handlicher Rettungsschlitten für den **Ein-Mann Betrieb**. Wird hauptsächlich in der Falllinie gefahren. Durch das **Ketten -Bremsssystem** auch auf steilen und/oder vereisten Pisten problemlos beherrschbar.

Für Schigelände in allen Schwierigkeitsgraden, präpariert oder unpräpariert.

Optimale Richtungsstabilität durch drei stabile Führungskufen aus durchgehenden, speziell für den Canadier entwickelten Alu-Dreikantprofilen.

Ideale Verletztenlagerung durch die ebene Form des CANADIERS speziell in Verbindung mit einer Vakuum-Matratze.

Qualität für lange Lebensdauer: Der CANADIER ist komplett aus Anticorodal-Aluminium Legierung gefertigt. Die Aluminium-Führungsprofile dienen gleichzeitig als Zusatzrahmen. Dadurch wird der CANADIER sehr struktur- und verwindungssteif. Deichseln, Traggriffe, Schutzprofile und Deichselhalterung sind pulverbeschichtet.

Abnehmbare Deichseln, mit Schnellverschlüssen in Fahr- oder Transportposition fixierbar.

Vier Traggriffe an den Enden des Schlittens erleichtern die Handhabung.

Vier Fixiergurte mit Alu - Klemmschnallen für sicheren Halt des Verletzten. Mit Handschuhen bedienbar, stufenlos verstellbar, bruch- und vereisungssicher.

Inklusive **Bremskette** - sehr widerstandsfähige, kadmierte Ausführung mit Befestigungskarabinern.

Art. Nr.	93004	
Abmessung	Länge:	2.000 mm
	Breite:	6000 mm
Gewicht	19,0 kg (inkl. Deichseln)	
Anmerkungen	Bremskette inkludiert.	