


## AKJA 2000 - KURZE VERSION RETTUNGSSCHLITTEN

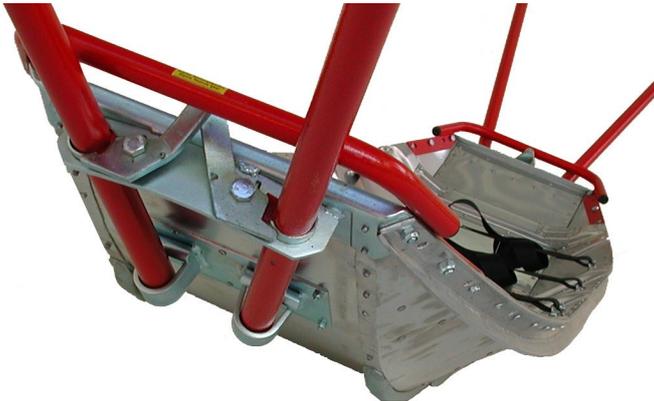

**Für Schigelände** in allen Schwierigkeitsgraden, präpariert oder unpräpariert.

Besonders gut in **extrem steilen und/oder vereisten** Hängen und Buckelgelände. Durch **verkürzte Länge von 200cm** sehr handlich.

Der **klassische Akja** in durchgehender Ausführung für **Zwei-Mann Betrieb**. Design in mehreren tausend Stück weltweit bewährt.

**Jahrelange Haltbarkeit:** Der Schlittenkörper ist komplett aus hochfester Aluminiumlegierung gefertigt.

**Stabile Fahreigenschaften:** Stahlkufen mit Harscheisen an der Unterseite des Akjas und zusätzliche seitliche Kufen für Sicherheit auf allen Schneearten.

**Vier abnehmbare Deichseln** mit großen Rundgriffen für sicheren und komfortablen Halt. Besonders biegefest durch integriertes Aussteifungsprofil.

**Deichselhalterung mit Bajonett-Schnellverschlüssen**, verschleißfrei und robust. Einfach und sicher zu bedienen, 100 % vereisungssicher.

**Tragbügel** an beiden Enden für komfortables Heben und Tragen des Akjas mit dem Verletzten.

**Vier Fixiergurte mit Alu - Klemmschnallen** für sicheren Halt des Verletzten. Mit Handschuhen bedienbar, stufenlos verstellbar, bruch- und vereisungssicher.

Art. Nr.	<b>93059</b>	
Abmessung	Länge:	2.000 mm
	Breite:	560 mm
	Deichsellänge:	1.650 mm
Gewicht	26,0 kg (inkl. Deichseln)	
Anmerkungen	Kurze Version. Ideal für Gondeltransport.	