


HUBSCHRAUBER BERGESACK Mod. CHRISTOPHORUS II

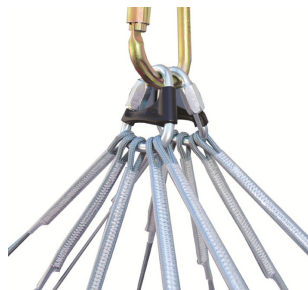

HEMS Bergesack für den Transport einer verletzten Person. Schutzsack zur **vollständigen Umschließung des Patienten**, hergestellt aus reißfestem, wasserundurchlässigem Spezial-Perlon Gewebe.

Das endlos vernähte **Traggurt-Geflecht** aus 45mm PES-Gurt ermöglicht eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zur perfekten horizontalen Lagerung des Verletzten.

Spikestreifen an der Unterseite, **seitliche Tragschlaufen** zum Anheben des Verletzten und zur Anbringung der Aufhängung.

Seitliche Stautaschen zur vollständigen Versorgung der Aufhängung.

Großflächiger, längsverlaufender Klettverschluss zur perfekten Anpassung an die Größe des Verletzten, zusätzlich gesichert mit vier außenliegenden **Verschlussgurten**.

Gepolsterte Kopföffnung, vorbereitet zur Anbringung der optionalen Gesichtsschutzhaube (# 93281).

Aufgenähte **Verstautasche** im Fußbereich mit seitlichem Reißverschluss für Vakuumpumpe und Stiffnecks inkl. großflächigem Flauch für die Befestigung des optionalen RBS Rotationsbremssystems (#93371).

Aufhängung: 10-Punkt Aufhängung mit hochfesten Seilen und vernähten Augen, zentral in zwei Deltalinks zusammengefasst.

Art. Nr.	922X - 93195	
Abmessung	Länge:	2.050 mm
	Breite:	560 mm
Gewicht	Gesamt:	3,4 kg
Empfohlenes Zubehör	Gesichtsschutz	(# 93281)
	RBS	(# 93371)
	Transporttasche	(# 93227)
	Vakuummratze 80	(# 81350)
	Vakuumpumpe EVO	(# 93134)
Zertifizierung	entsprechend EASA CM-CS-005 Simple PCDS (EU Baumusterprüfbescheinigung E 7111/1)	