


HUBSCHRAUBER BERGESACK Mod. CHRISTOPHORUS EVO

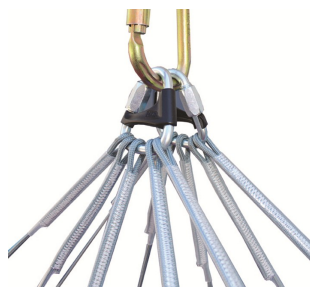

HEMS Bergesack für den Transport einer verletzten Person. Schutzsack zur **vollständigen Umschließung des Patienten**, hergestellt aus reißfestem, wasserundurchlässigem Spezial-Perlon Gewebe.

Das endlos vernähte **Traggurt-Geflecht** aus 45mm PES-Gurt ermöglicht eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zur perfekten horizontalen Lagerung des Verletzten.

Verstärkter **Boden aus Cordura** – Gewebe mit **Spikestreifen** an der Unterseite, **seitliche Tragschlaufen** zum Anheben des Verletzten und zur Anbringung der Aufhängung. Seitliche **Stautaschen** zur vollständigen Versorgung der Aufhängung.

Großflächiger, längsverlaufender Klettverschluss zur perfekten Anpassung an die Größe des Verletzten, zusätzlich gesichert mit vier außenliegenden **Verschlussgurten**, die in kleinen Stautaschen versorgt werden können.

Aussteifungsstreifen unter Schulter und HWS, **gepolstertes und zusammenfaltbares Innenkopfteil**.

Kopfföffnung vorbereitet zur Anbringung einer optionalen Gesichtsschutzhaube (#93281).

Inklusive **Verstautasche** für Vakuumpumpe und Stiffnecks.

Aufhängung: 10-Punkt Aufhängung mit hochfesten Seilen und vernähten Augen, zentral in zwei Deltalinks zusammengefasst.

Art. Nr.	922X - 93197	
Abmessung	Länge:	2.050 mm
	Breite:	560 mm
Gewicht	Gesamt:	4,4 kg
Empfohlenes Zubehör	Gesichtsschutz	(# 93281)
	RBS	(# 93371)
	Transporttasche	(# 93227)
	Vakuummratze 80	(# 81350)
	Vakuumpumpe EVO	(# 93134)
Zertifizierung	entsprechend EASA CM-CS-005 Simple PCDS (EU Baumusterprüfbescheinigung E 7111/1)	