

GLEIT-SKI MODUL TYRAL

Die beiden Gleitski-Module tragen auch in weichem Schnee gut auf und lassen so die Trage TYRAL auch im matschigen Schnee **einfach gleit- und ziehbar** bleiben.

Die **baugleiche und symmetrische Form** vermeidet ein Verwechseln der Anbringung.



Die Gleitski-Module können in drei verschiedenen Positionen angebracht werden.

- Für flaches Gelände rechts und links versetzt (Kopf und Fußteil) anbringen.
- Für vertikal abwärts an den beiden Fußseiten anbringen.
- Für vertikal aufwärts an den beiden Kopfseiten anbringen.

Die beiden Gleitski-Module können einfach mittels Rohrklappsplint an der Trage **werkzeuglos** befestigt werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass auch bei „Radbetrieb“ die beiden Gleitskimodule an der Trage verbleiben können – **kein ständiges Umbauen** notwendig. Die Radstütze wird nur für das Überqueren von Schneefeldern abgenommen.

Es wurde bewusst auf eine Plastikwanne verzichtet um ein **nachhaltiges, langlebiges Produkt** anbieten zu können.

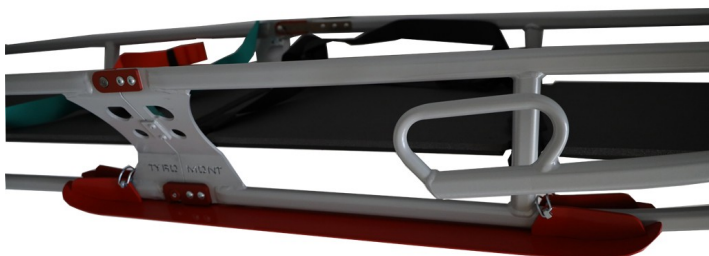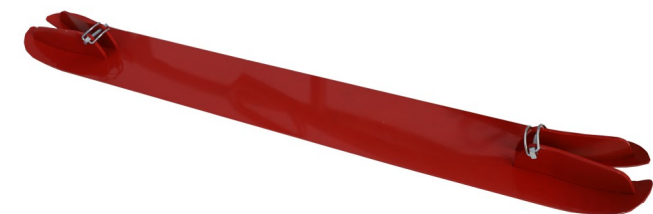

Art. Nr.	93262	
Abmessung	Länge:	935 mm
	Breite:	120 mm
Gewicht	Gesamt pro Paar:	3,3 kg
Anmerkungen	Stückweise zu bestellen	